



[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)



## Ürün Katalođu

“sađlık teknolojisindeki son nokta”



[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)

## ÜRÜNLERİMİZ

- HASTABAŞI MONİTÖRLERİ
- EKG CİHAZLARI
- PULSEOKSİMETRELER
- FETAL MONİTÖRLER
- ENJEKTÖR POMPALARI
- İNFÜZYON POMPALARI
- KÜVÖZ VE FOTOTERAPİ
- DEFİBRİLATÖRLER
- İNVAZİV KABLolar, İBP KABLolar
- ELEKTRO KOTER AKSESUARLARI
- İSİ PROBLARI
- EKG KABLO , EKG LEAD
- SPO2 PROB
- SPO2 KABLO
- NİBP MANŞON , ADAPTOR ve HORTUMLARI
- OKSİJEN SENSÖRLER, FLOW SENSÖRLER
- VENTİLATÖRLER
- ANESTEZİ CİHAZLARI
- NEMLENDİRİCİLER
- VENTİLATOR AKSESUARLARI

# Sensors Oxygen/Flow



# Flow sensors

## 1. Flow sensors

### A SpiroLife® MK01900

The reusable sensor of Dräger Medical. This sensor is the only device which combines the advantages of the hot-wire anemometer technology with the possibility of sterilization. The SpiroLife sensor can be used with all devices where today the Spirolog sensor is applied, i.e. Primus™, Cicero®, Evita®, Evita® 4 or Evita XL. For the anesthesia workstation Zeus® only the SpiroLife can be used.

### B Spirolog® flow sensor, 5 pcs. 8403735

Set of 5 pieces for flowmeasuring.

### C Y-piece with flow sensor 8410185

Y-piece with flow sensor for Babylog® 8000 series.

### D Flow sensor for neonates 8411130


Straight flow sensor for Babylog 8000/Evita 4/ Evita 2 *dura*®.

### E Insert for flow sensor for neonates, 5 pcs. 8410179

Insert for flow sensors for neonates, set of 5 for Babylog 8000 series.

### F Alveon (with Luer Lock) MK01400

Alveon Flow sensor; hot-wire sensor for direction-dependent measurement of volumetric flow (Flow) and calculating the volume in Dräger anesthesia and ventilation units (e.g. Zeus).

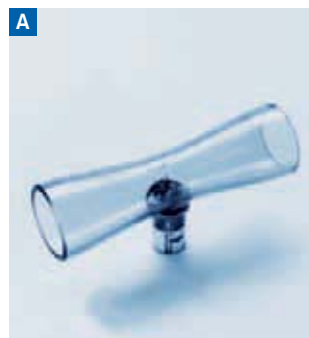

# Flow sensors cable



<b>A</b>	<b>Flow sensor cable</b> Connecting cable for Dräger flow sensors of Babylog series.	<b>8409626</b>
<b>B</b>	<b>NMR flow extension cable</b> for PM 8050 NMR.	<b>8306370</b>
<b>C</b>	<b>Connecting cable for flow sensor</b> Connecting cable for Dräger flow sensors (Spirolog®/SpiroLife®).	<b>8305622</b>

# Oxygen sensors

## 2. Oxygen sensors

### **A Oxygen sensor (O<sub>2</sub> capsule) 6850645**


Dräger O<sub>2</sub> sensors are electrochemical systems intended for the measurement of O<sub>2</sub> partial pressure. The sensors work according to the galvanic cell principle. The gas mixture to be monitored diffuses through a plastic membrane into the sensor's liquid electrolyte. The electrolyte contains a working electrode (gold electrode) and a counter-electrode (lead electrode). The oxygen to be monitored is electrochemically reduced at the working electrode. Compatible Dräger devices, e.g. Fabius®, Fabius GS, Narkomed, Sulla/Titus®/Trajan (Oxydig), Evita® family, Incubator 8000, Babylog® (Oxydig).

### **B Fast oxygen sensor (S-O<sub>2</sub> head) 6850930**

Dräger O<sub>2</sub> sensors are electrochemical systems intended for the measurement of O<sub>2</sub> partial pressure. The sensors work according to the galvanic cell principle. The gas mixture to be monitored diffuses through a plastic membrane into the sensor's liquid electrolyte. The electrolyte contains a working electrode (gold electrode) and a counter-electrode (lead electrode). The oxygen to be monitored is electrochemically reduced at the working electrode. Compatible Dräger devices, e.g. Primus™, Julian®, Cicero®, Cato®, Patient Monitor PM 8050 and PM 8060.

### **C Oxydig sensor housing 6850250**

### **D O<sub>2</sub> sensor housing, Anemone 6850720**

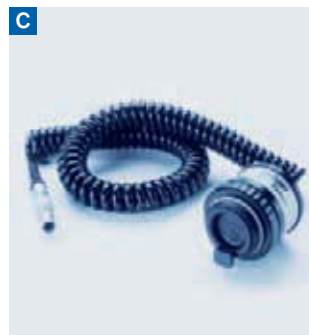

# TAMİR BAKIM ONARIM

## 0216 518 65 45-46

01010101000101010001010100011010010011

01010101000101010001010100011010010011

www.bmtmedikal.com.tr

**BMT Medikal olarak her marka ve model tıbbi cihazların teknik servis ve bakımı yapılır.**



www.bmtmedikal.com.tr



\*Bu katalogta bahsedilen ürünler, logolar ve şirket isimleri başka firmaların ticari markaları olabilir. Bu durum yukarıda adı geçen markaların Bmt Medikal ile herhangi bir yakınlığı veya onayı olarak algılanmamalıdır. Bu dokümanda verilen bilgiler dikkatlice kontrol edilmiş ve doğruluğuna inanılmıştır. Sürekli ürün gelişimi adına, Bmt Medikal bu dokümanda ve tarif edilen üründe uyarı ve bilgilendirme yapmadan değişiklikler ve gelişmeler yapma hakkını saklı tutar.



[www.bmtmedikal.com.tr](http://www.bmtmedikal.com.tr)



**BMT MEDİKAL SİST. VE ÜRÜNL. SAN. ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.**  
Aydınevler Mah. İskele Sk. No:13/1 Maltepe-İstanbul - TURKEY  
Tel: 0216 518 65 45 - 46 Fax: 0216 518 65 47  
e-mail: [info@bmtmedical.com](mailto:info@bmtmedical.com) web: [www.bmtmedical.com](http://www.bmtmedical.com)